

CARENA™ IVA

Intensivvårdssäng

CARENA™ IVA



Merivaara's nya Carena IVA för intensivvård

- Thorax röntgenbilder är enkelt att utföra: - patienten behöver ej lyftas
- exakt placering av röntgenplåten
- Bilder även i halvsittande läge
- Den nya 3/4 stadiga sänggrinden är säker och hög nog att användas med tjocka intensivvårdsmadrasser.
- Justerbar fyrdelad madrassbas -Hjärtläge -, Fowler och Psoas positioner etc. är lätta att ställa in.
- Extrem lägsta höjd på 358 mm
- Passiv luftmadrass med tryck, vårdprestanda och multimembran-teknologi
- SWL 330 kg





Madrassbas

- Röntgen madrassbas 80 cm A42391500
- Röntgen madrassbas 90 cm A41978200



Röntgenbilder

- Luft pump röntgenplan A42410900
- Findray röntgenplatta, analogisk 707996
- Findray röntgenplatta, digital 707995




3/4 sidogrind A423625000



Madrass

- Passiv luftmadrass 200 x 75 x 13cm 100000962
- Passiv luftmadrass 200 x 85 x 13cm 100000963

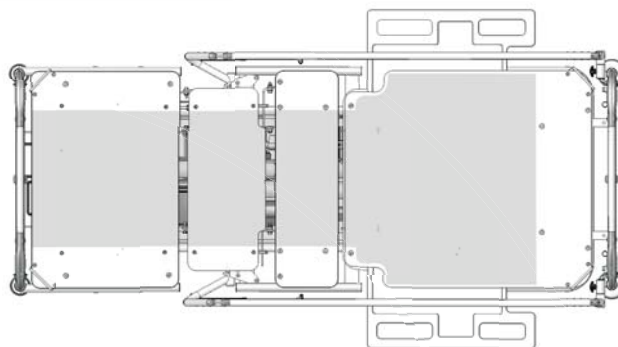

röntgen madrassbas med luftpump till röntgenplan

- Carena's röntgenmadrassbas med luftpump till röntgenplan möjliggör bildhantering av bröstorg samt att bilden kan tas i sittande läge.
- det behövs ingen extra händer för att lyfta patienten vid placering av röntgenkassett, en sjuksköterska är tillräckligt, - detta medför en stor förbättring för både vårdgivare och patienter.

Nya 3/4 grinden A42362500

- gasfjädern bidrar till- lätt att hantera, sänks mjukt - ingen risk för klämskador. Patentsökt
- hög nog för även tjocka intensivvårds madrasser
- uppfyller kraven i nya IEC 60601-2-52

Passiv luftmadrass

- lämplig för patienter i låg, medium, hög och mycket hög riskkategori.
- tryckreducerande yta, speciellt medicinskt skum för att öka komforten för patienter
- automatisk insug, ingen pump, motor eller strömförsörjning behövs.
- kompakt och låg vikt.


Teknisk Specifikation

- 4-delad madrassbas, Röntgengenomskinligt högtryckslaminat.
- 80cm eller 90cm ram epoxilackad eller kromad.
- Hjul Ø 125, 150 eller 200mm, tilläggsval 5e hjulet
- Längd 2154 mm (stöthjul)
- Bredd 800 - 900mm (utan grindar)
- Höjd 373 mm - 878 mm (med 125 mm hjulen)
- max. patient vikt 300kg
- SWL 330kg
- Madrassbashöjd justerbar: 373 - 878mm (med 125 mm hjulen)
- Vikt 118 - 130kg
- Bensektion justerbar -24° - +29°
- Ryggsektion justerbar 0° - +70°
- Chockläge justerbart -6° - +12°

CARENA™ IVA

Sidogrind

- 3/4 sidogrind med gasfjäder, A42362500 epoxylackad eller kromad

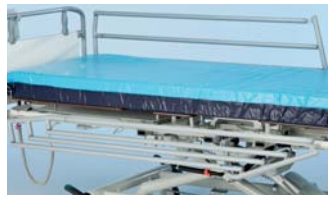

A42362500

Madrassbas

- Röntgen madrassbas 80 cm A42391500
- röntgen madrassbas 90 cm A41978200




100000962, 100000963



A42410900

Röntgenbilder

- Luftpump röntgenplan A42410900
- Findray röntgenplatta, analogisk 707996
- Findray röntgenplatta, digital 707995

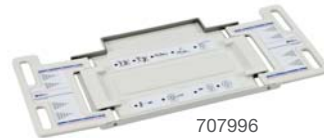

707996



707995

Madrass

- Passiv luftmadrass 200 x 75 x 13cm 100000962
- Passiv luftmadrass 200 x 85 x 13cm 100000963

Gavlar

- gavel, 80 cm 100009890
- gavel, 90 cm 100009990
- fällbar gavel, 80 cm A41935200
- fällbar gavel, 90 cm A41982900
- ergonomisk gavel (höjd 48 cm) 80 cm A41948700
- ergonomisk gavel (höjd 48 cm) 90 cm A42180400
- ergonomisk gavel (höjd 40 cm) 80 cm A42180500
- ergonomisk gavel (höjd 40 cm) 90 cm A42180100



Färger för madrassbas och gavlar



100009890, 100009990



A41935200, A41982900



A41948700, A42127900

Korgar

- journalkorg 128009784
- tillbehörskorg A41955500



128009784



A41955500



128009768

Hylla

- monitor och journalhylla 128009768

Elektriska komponenter

- Rörelsebegränsare TLB A41987800




A41987800



100005780



100000499

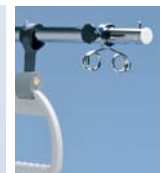

100000713

Droppställ


- 2-kroks 100005780
- 4-kroks 100000499
- Droppåse hållare för lyftbåge 100000713

Hållare


- hållare dränage A42097900
- hållare dränage A41916000
- krok A41955300
- hållare för urinflaska 128009790



A42097900

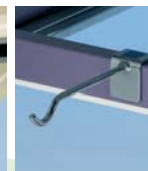

A41955300

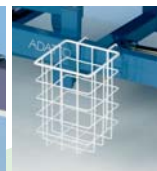

128009790

Hjul

- 125 mm PJP and Design
- 150 mm PJP and Design
- 200 mm Design
- femte hjulet som tillval A41856300



A41856300



A41884100



A4184500



10000127



100009756

Andra tillbehör

- lyftbåge med handtag A41884100
- fäste för lyftbåge A42108500
- upprensingsstöd A4184500
- armstöd 100000127
- fällbara skjuthandtag 100009756
- tillbehörsskena, 1 st. 100000701
- madrassstöd A41986900
- fäste för handkontroll A42038900
- upprensingsstöd och hållare för handkontroll A42066600
- tillbehörsfäste för ryggsektion A41980200
- nivåmätare A42068000
- krok för elektrisk kabel A41987307
- hållare för syrgastub A41897900



100000701



A41986900



A42038900



A42066600



A41980200



A42068000



A41987307



A41897900